


■王様の椅子・腹臥位マットの作り方■

□王様の椅子（赤ちゃんスポンジ椅子）の作り方（自作）

乳児期ではスポンジを用いて椅子を作成します

1. 体の寸法を測ります

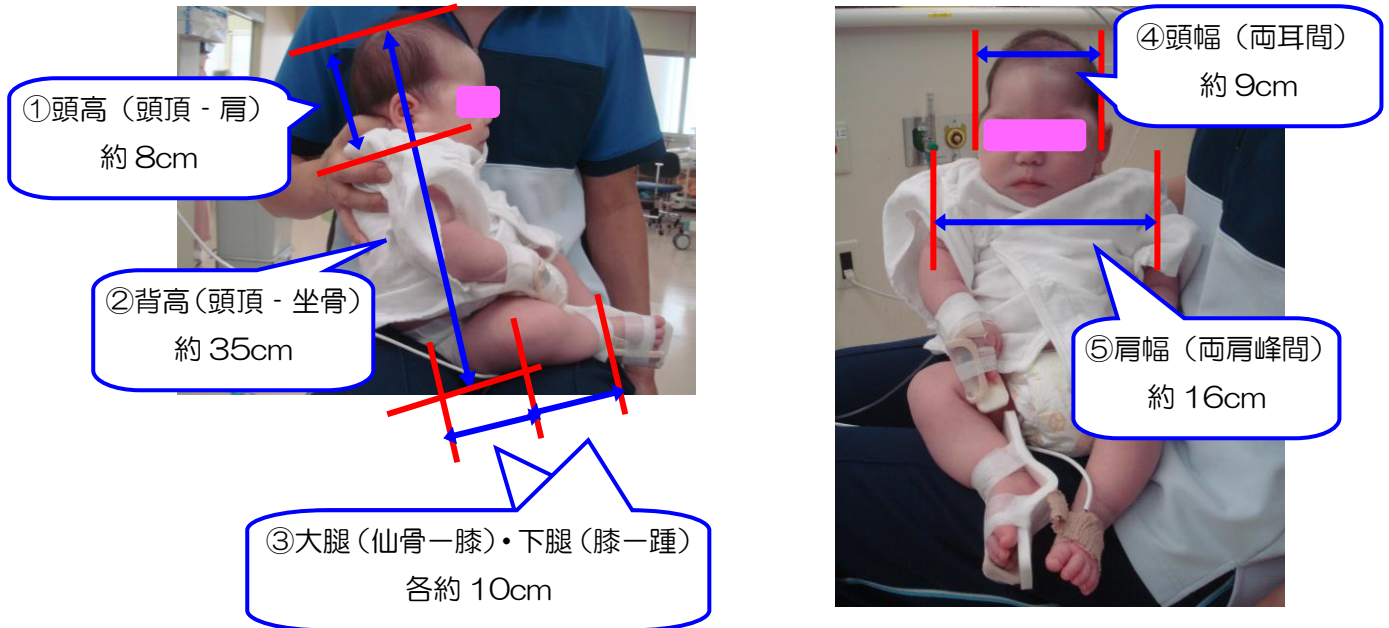

2. 座布団用スポンジを 2~3 枚用意します（一片約 50cm / 厚さ約 6cm）



スポンジは最寄りのホームセンター・しまむら
または（株）カクミズにご注文ください。

株式会社カクミズ 〒399-8205 長野県安曇野市豊科 4889

TEL0263-72-2838 FAX0263-72-0281


3. スポンジにペンで線をひきます




4. 線に沿ってカッターでスポンジを切ります



5. すべての型を切り揃えます

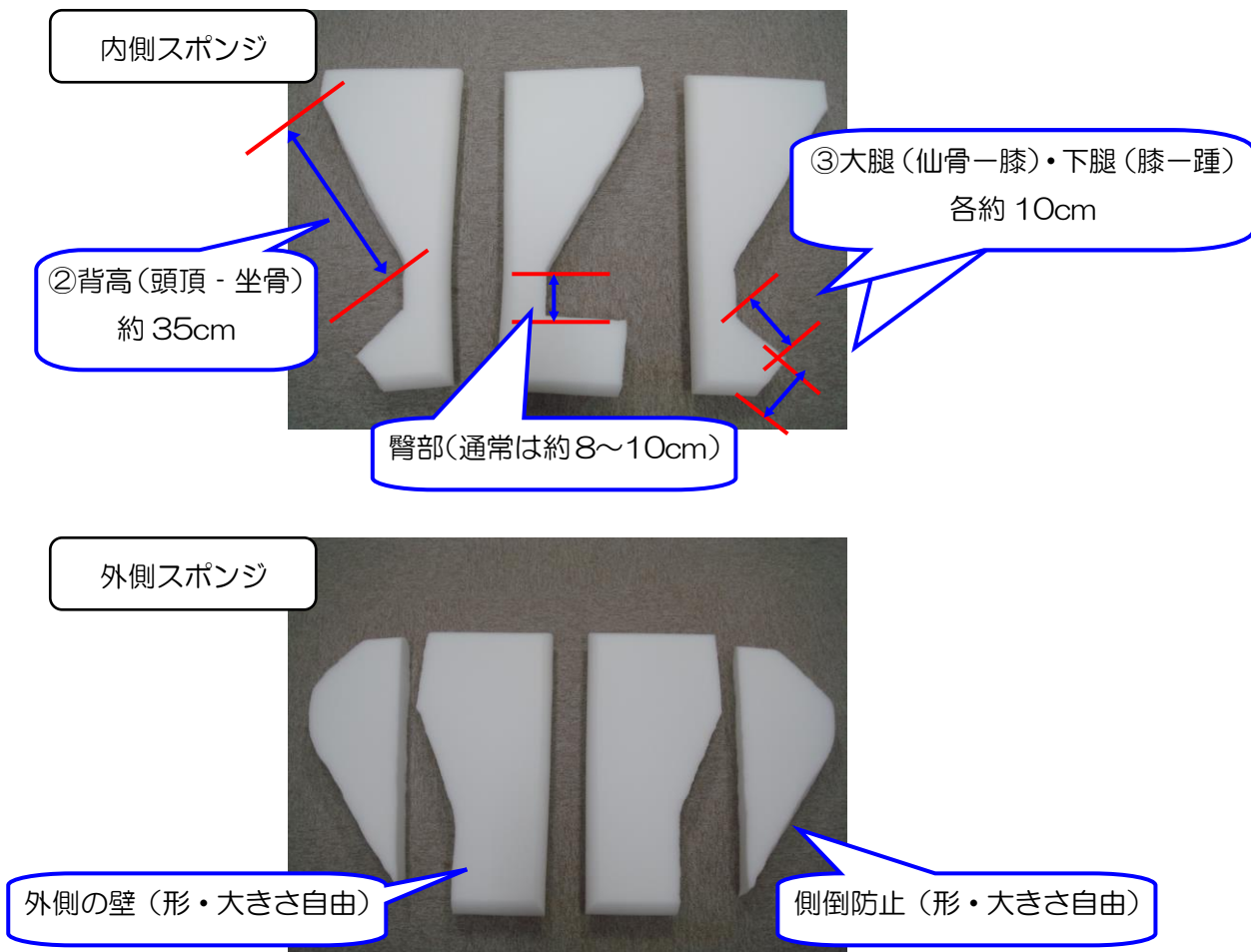

6. 切り取った型を縦に合わせます

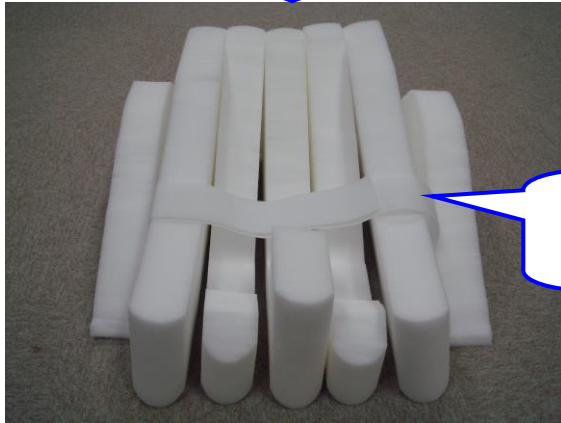

ベルクロも用意します
(転倒予防ベルト)



7. スポンジに接着スプレーを吹きかけます





ムラなく接着面の両面にスプレーします
接着面が乾くまで待ちます (1 分間以上)




おすすめは 3M の 99


8. スポンジを合わせていきます

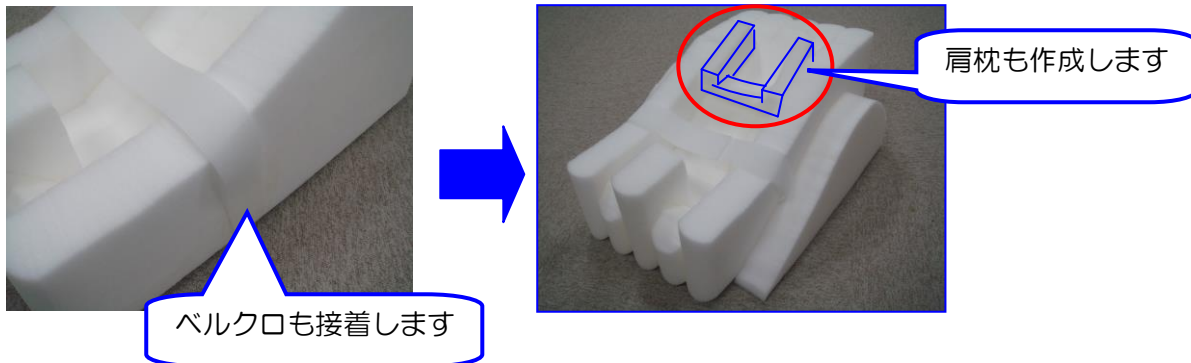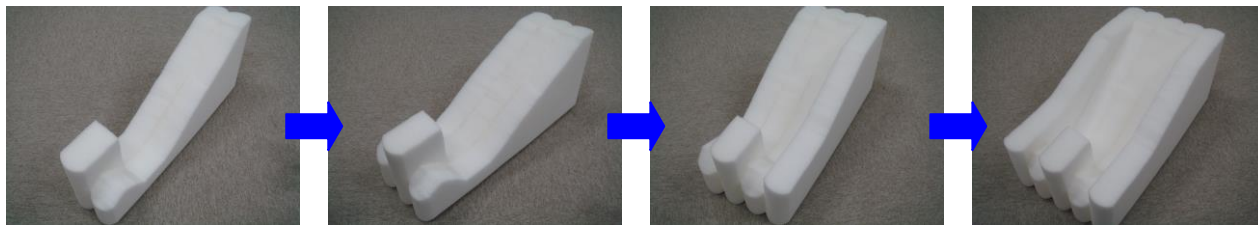

9. 完成（肩枕寸法）

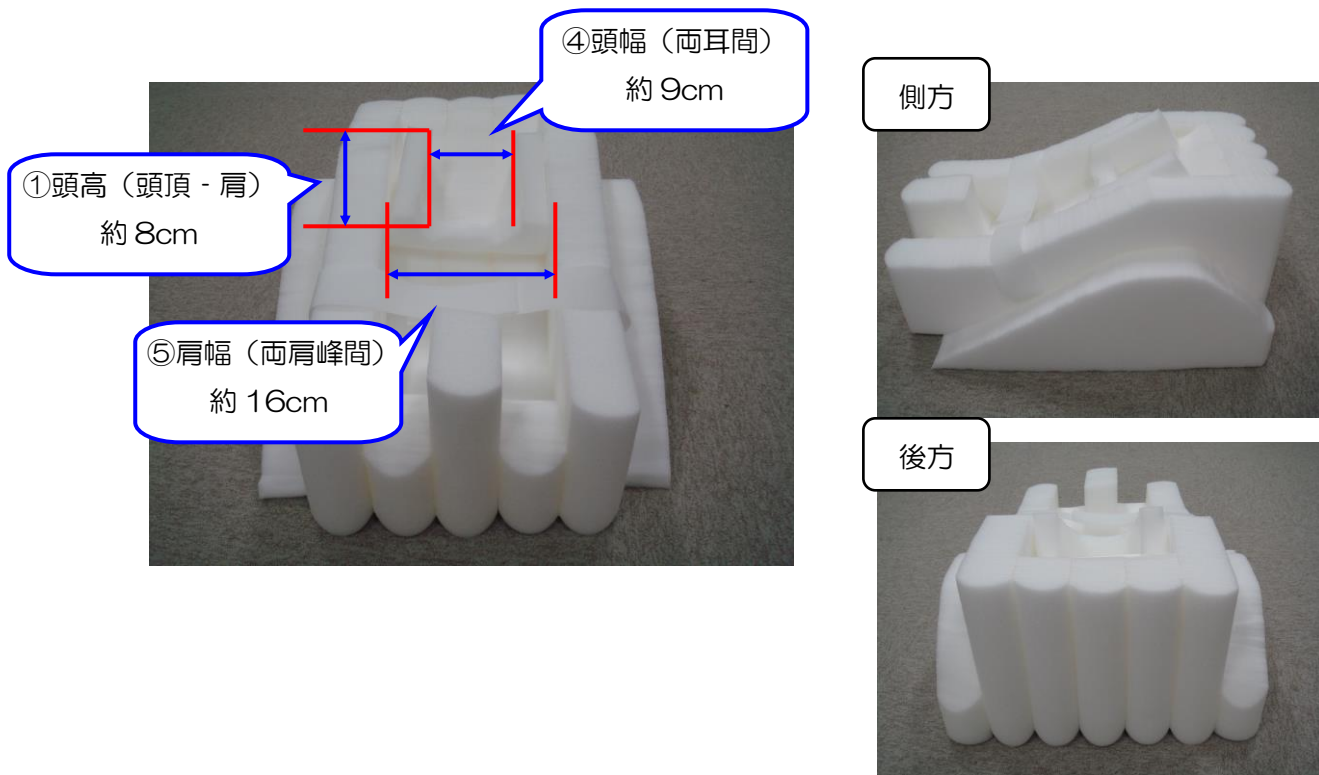

10. 王様の椅子に座ってみよう！

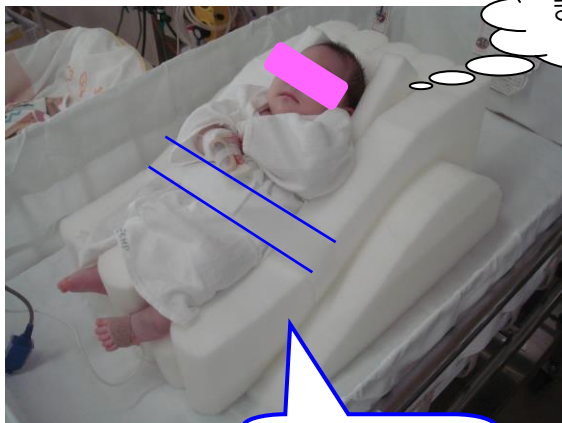

きもちいいなあ〜

実際に座って微調整します（カッターで削る）
椅子のなかにタオルなどを敷いて座ります
暑いので体温調整に注意します

ベルトをします

- スポンジの切り口はギザギザでも完成すると気にならなくなります
- 慣れてくると 30 分程度で作成できます
- 完成後の接着剤の臭いは 1 日で抜けます
- 椅子は新生児病棟にそのまま持ち込みます



□クッションチェアの購入と調整


乳児期以降、頭の保持が不安定な児で療育手帳または身体障害者手帳を取得した児は既製品を購入します。必要であれば児に合わせて改良調整をします。



「クッションチェア」（株式会社無限工房）
頭や体幹の保持が困難な児に用いやすく、
市町村が実施する日常生活用具給付等事業
により補助金が利用できます

口腹臥位マットの作り方（自作）

新生児・乳児期ではスポンジを用いて腹臥位マットを作成します

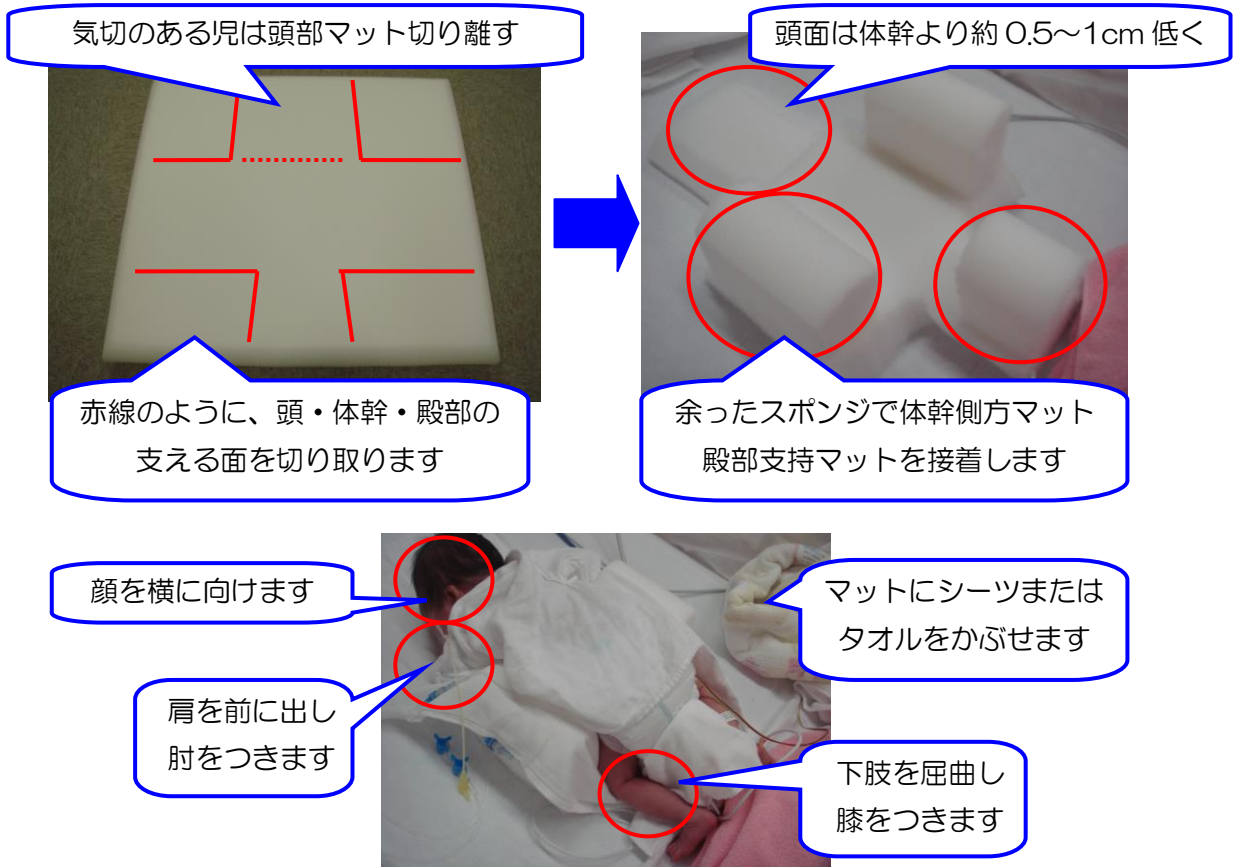

口腹臥位マットのオーダーメイド注文

乳児期以降、身体障害者手帳を取得した児は補装具作成業者に依頼し、児の体格と目的に合ったオーダーメイドの腹臥位マットを注文します。

